
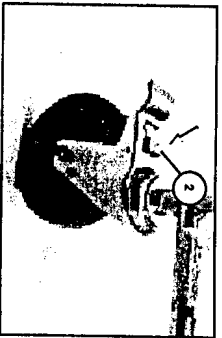



## Notkunarleiðbeiningar

### Ortopedia SHCDA salernisstóll



1. Aksturshandfang
2. Bak
3. Seta - svört
4. Koppur
5. Stilling á örmum
6. Bremsur á hjólum
7. Framhjól
8. Armar
9. Seta – hvít
10. Stilling á fótþvílum
11. Kálfaband
12. Fótafjól

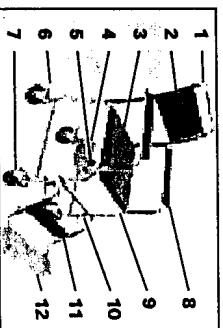


Bremsa á hjólum(2).  
Mikilvægt er að bremsa hjólin áður en sest er í stólinn.

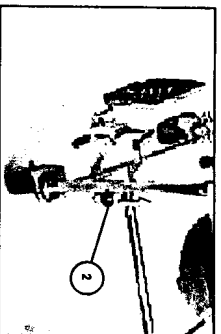

Hægt er að taka fótþvíluna af með því að lyfta fletinum (2) eða færa hana til hliðar.

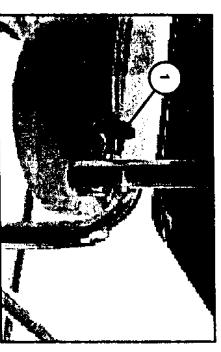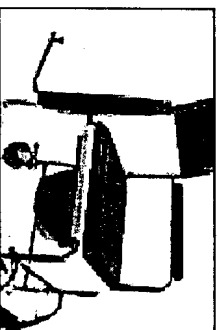

Hægt er að leggja arminn niður með því að taka út tappann. Auðveldar m.a. flutning frá hlið. Mikilvægt er að smella vel þegar armurinn er settur á sinn stað.

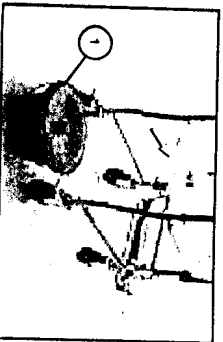

Fata fylgir stólinum sem hægt er að taka af og tæma.

Þrif : Þvoð stólinn með vatni og sápu.  
Ekki má nota sterk sápuefni.  
Þurrkið af með klút eða svampi.

*Mikilvægt er að stólinn sé í bremsu þegar notandinn sest í hann og þegar ekki er verið að aka honum.*

*Nánari upplýsingar í verslun Eirbergs ehf. Stórhöfða 25, 110 Reykjavík.  
Sími 569 3100 Fax 569 3101 Netfang eirberg@eirberg.is*